CE IVD

Precision in Hemostasis

Behnk Elektronik

# BE Owren Buffer Owren Koller Buffer

Verdünnungsmittel für Humanplasma bei Gerinnungstests

REF 771700: BU (16 x 15 mL)

## | ZWECKBESTIMMUNG

Gepufferte Lösung zur Verwendung als Verdünnungsmittel für Humanplasma bei der In-vitro-Bestimmung von Gerinnungstests.
Geeignet für die Verwendung bei manuellen Verfahren, auf halbautomatischen Gerinnungsmessgeräten oder auf automatischen Gerinnungsanalysegeräten unter Verwendung von BEHNK-Reagenzien.
Für den Einsatz in klinischen Laboren durch medizinisches Fachpersonal.

## TESTPRINZIP

Bei der Bestimmung der Einzelfaktoren (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII) mit Mangelplasma ist es notwendig das Plasma zu verdünnen, um den nachzuweisenden Faktor in einen präsentablen Bereich zu bringen.

## GENERELLES

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## | REAGENZIEN

| | | |
|---|---|---|
| BU | **Owren BU** | Owren Koller Buffer |
| Barbital-Puffer | | pH 7,35 (20°C) |
| Konservierungsmittel | | |

Gemäß Verordnung (CE) 1272/2008 ist dieses Reagenz nicht als gefährlich eingestuft.

## VORSICHTSMASSNAHMEN [1] [2]

- Siehe das Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist oder auf www.behnk.de
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Unversehrtheit des Inhalts.
- Abfallentsorgung: Die in dem jeweiligen Land geltenden Vorschriften beachten.
- Alle Proben oder Reagenzien biologischen Ursprungs sollten als potenziell infektiös behandelt werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Rechtsvorschriften.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

## HANDHABUNG DER REAGENZIEN

**BU**: Gebrauchsfertig

## LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Ungeöffnete Flaschen, bei 2-8 °C lichtgeschützt gelagert, sind bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Nach dem Öffnen, gut verschlossen in der Originalflasche, gelagert und verwendet wie oben angegeben, sind die Flaschen haltbar:

- Bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum.
- Verwerfen Sie jedes trübe Reagenz.

## PROBENENTNAHME UND VORBEREITUNG

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## EINSCHRÄNKUNGEN

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE MATERIALIEN

Allgemeine Ausrüstung für das medizinische Labor.
Präzisionspipetten
Automatischer oder semi-automatischer Gerinnungsanalysator
Demineralisiertes Wasser

Behnk Reagenzien wie folgt:

REF 771602 BE Factor II: Deficient plasma FII
REF 771605 BE Factor V: Deficient plasma FV
REF 771607 BE Factor VII: Deficient plasma FVII
REF 771608 BE Factor VIII: Deficient plasma FVIII
REF 771609 BE Factor IX: Deficient plasma FIX
REF 771610 BE Factor X: Deficient plasma FX
REF 771611 BE Factor XI: Deficient plasma FXI
REF 771612 BE Factor XII: Deficient plasma FXII

## REFERENZBEREICH

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## QUALITÄTSKONTROLLE

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## TESTDURCHFÜHRUNG

Verdünnung der Plasmaen entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## KALIBRATION

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## KALKULATION

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.

## PERFORMANCE

Entsprechend der Packungsbeilage des verwendeten Reagenzes.


## REFERENZEN


(1) *Occupational Safety and Health Standards; Bloodborne pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998); 6, p.267-280*
(2) *Directive du conseil de l'Europe (90/679/CEE) J. O. de la communauté européenne n°L374 du 31.12.1990, p.1-12*


| = Signifikante Modifikationen

IFU_771700-DE_V03_20260902

**Symboltabelle**

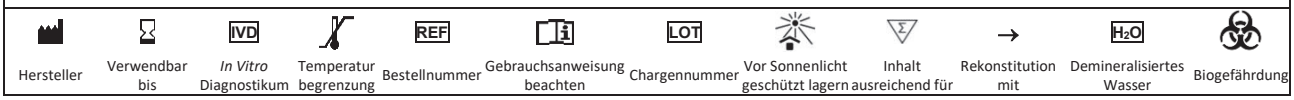



Hergestellt von
BIOLABO S.A.S.
Les Hautes Rives
02160 Maizy, France

Made in France

Vertrieb durch
Kommanditgesellschaft Behnk Elektronik GmbH & Co.
Hans-Böckler-Ring 27
22851 Norderstedt, Germany

T. +49 (0)40-529 861 0
F. +49 (0)40-529 861 99
info@behnk.de


Letzte Revision: www.behnk.de